



AC-2000DA

BİNOKÜLER KOLPOSKOP

ÖZELLİKLER

- Kolay Erişim
- Apokromatik Optik Tasarım
- 3'lü ve/veya Tek Yakınlaştırma
- Düşük Maliyet & Uzun Kullanım İçin LED Aydınlatma
- Entegre Video Kamera
- Hızlı Doku Boyut Ölçümü İçin Çift Optik Çember
- Entegre Yeşil Filtre
- Kompakt, Hafif ve Tekerlekli Gövde
- Ergonomik Tasarım
- Basit Kurulum

ANDA
MEDİKAL
ALLTION®

AC-2000DA

ALLTION® AC-2000DA serisi kolposkoplar daha önce Dünya çapında yüzlerce satmış AC-1000 Serisi üzerine kuruludur. Klasik estetiğin ve modern teknolojinin kombinasyonu. Bu; güzel görümlü, dinamik, ve elegant kıvrımlara sahip kolposkopu tasarlayan kişi aşağıdaki ödüllerin sahibi Mr. Zhang Xun dur.

- 2007 RED DOT Konsept Ödülü: En İyinin En İyisi
- 2008 RED DOT Konsept Ödülü
- 2009 IF Ürün Tasarım Ödülü: Altın

Baş-Gövde Eğim Kilidi

Reosta Kolu

Diopter Kolu

FULL HD Gerçek Zamanlı Çıkış Birimi

Vizör

İnce Odak Ayarı

LED Lamba Kapağı

3'lü Yakınlaştırma Kolu

Yeşil Filtre Kolu

Two Circles for Measuring Size of Tissue

Vizör Kolu

İnce Yükseklik Ayarı


DOĞRUDAN ERİŞİM

Alet Kullanımını kolaylaştıran doğrudan erişim özellikli gövde yapısı

MÜKEMMEL OPTİK ÖZELLİKLER


1. Yüksek Çözünürlük
2. Gerçek 3-Boyut Ölçekli Görsel Reprodaksiyonu
3. Yüksek Alan Derinliği
4. Geniş Görüş Açısı
5. İyi Kontrast
6. 10800P FULL HD Gerçek-Zamanlı Görüntü Çıkışı

Apokromatik optik tasarım sayesinde 3 tip renkli ışığın kromatik sapmasını ortadan kaldırabilir.

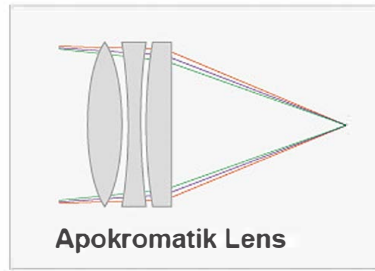

Apokromatik Lens

Renk Sapmalarını Düzeltir

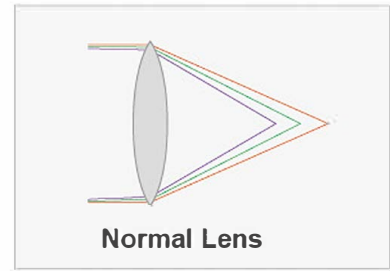

Normal Lens

Renk Sapmasına Bağlı Görünür Renk Karışımı

3'lü Yakınlaştırma Ve/Veya Tekli Yakınlaştırma

3'lü Yakınlaştırma (3.75x-7.5x-15x), en düşük yakınlaştırmadan genel bakışa, yüksek yakınlaştırmaya, hassas ve yakın inceleme ve tedaviye kadar uygulamanızın gereksinimlerini karşılamak için daha geniş yakınlaştırma aralığı ve daha fazla büyütme seçeneği sunar.




HIZLI DOKU ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇİFT OPTİK ÇEMBER

	φmm	A	B
A	3.75X	5.8	22.1
B	7.5X	2	11
B	15X	1	5.2



ENTEĞRE YEŞİL FİLTRE

Kan damarlarının tespiti için Yeşil Filtre

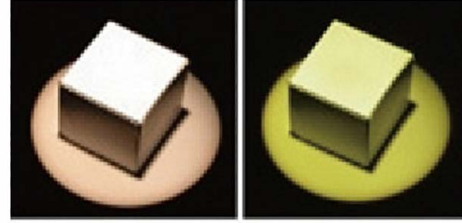

No Filter

Green Filter



LED AYDINLATMA

LED Aydınlatma ile gerçek renkler göz önünde. Kullanıma bağlı olarak 10.000 saat - 10 Yıl Kullanım Ömrü.

ENTEĞRE FULL HD VIDEO KAMERA

Belirli modellerde entegre bir 1080P FULL HD video kamera mevcuttur. Bu cihaz sayesinde doktorların hasta ile iletişim kurması çok uygundur. Entegre video kameradan gelen görüntüler doğrudan bir monitöre veya TV setine girilebilir. Veya USB adaptörüyle görüntü toplama yoluyla bir bilgisayara girilebilir veya bir sabit disk kaydediciye kaydedilebilir.



KOLAY MANEVRA İÇİN TEKERLEKLI KOMPAKT, HAFIF TABAN

Kolposkop, yalnızca 9,6 kg'lık kolayca kaldırılabilir kadar hafiftir. Taban, sabit durması ve serbestçe hareket etmesi için 5 tekerlek ile birlikte gelir. Çalışma alanınızı eşleştirmek için eğimli taban modeli de sağlıyoruz.



UZUN SÜRELİ KONFORLU HASSAS ÇALIŞMA İÇİN ERGONOMİK TASARIM

Tüm ergonomik tasarım, en rahat şekilde uzun süre hassas çalışma için kolposkopumuzla çalışabilmenizi sağlar. sırt ve boyundaki sorunlarınızı önler veya azaltır.

KULLANMAYA HAZIR

Alltion AC-2000DA serisi kolposkoplar, güvenli nakliye için başlık ayrı olarak paketlenmiş olarak teslim edilir. Kafa kolayca takılır. Bileşenler resimde gösterildiği gibi yerleştirilmiştir.



ÖZELLİK ALLTION AC-2000DA SERİSİ KOLPOSKOPLAR:

1. Toplam büyütme 3,75x, 7,5x, 15x, 3 adımlı modeller için ve 7,5x tek büyütme modeller için.
2. 300mm odak uzaklığı
3. Görüş Alanı: 79mm, 39mm, 19mm çap. 3 kademeli büyütme modeller için ve tek büyütme modeller için 39mm
4. Alan Derinliği: 3 kademeli büyütme modeller için 4,5mm, 1,13mm, 0,76mm ve tek büyütme modeller için 1,13mm
5. Işık yoğunluğu: >30.000 LUX
6. Ayrı ayrı ayarlanabilen mercek 16.7x 7. Gördüğünüz sorunun boyutunu ölçmeniz için yerleşik iki daireye sahip sağ mercek.
8. Parlaklık ayarı için dahili reostat
9. Gelişmiş kontrast için kullanıcı tarafından seçilebilen yerleşik yeşil filtre
10. LED ampul kolayca değiştirilebilir.
11. Çalışma Yüksekliği: 975 mm - 1135 mm
12. İnce odak ayarı Kollar
13. İki (Brüt/İnce) yükseklik ayarlı Kol
14. Ünite tamamen monte edilmiş ve güç açıldığında kullanıma hazırdır.
15. Ana Güç Kaynağı: 1 00V - 240V

Item and specification subject to change,
please contact Alltion for current production information.

	MODEL NO.	SPECIFICATION		
		Magnification	Binocular Head	Built in Camera
Complete Unit	AC-2110DA	Single	Straight	Nil
	AC-2111DA	Single	Straight	Full HD Video Camera
	AC-2310DA	3-Step	Straight	Nil
	AC-2311DA	3-Step	Straight	Full HD Video Camera
Assembly Kits	AC-2110DA Assembly Kit including colposcope head, head holder, power supply without post and base			
	AC-2111DA Assembly Kit including colposcope head, head holder, power supply without post and base			
	AC-2310DA Assembly Kit including colposcope head, head holder, power supply without post and base			
	AC-2311DA Assembly Kit including colposcope head, head holder, power supply without post and base			
Complete Unit	AC-2110DA Tilting stand	Single	Straight	Nil
	AC-2310DA Tilting stand	3-Step	Straight	Nil
	AC-2311DA Tilting stand	3-Step	Straight	Full HD Video Camera



ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com
info@andamedikal.com

