

ÖZELLİKLER

Model	SK-X9
Ölçüm Teknoloji	Multiband Biyolojik Resistans
Elektrik Kutbu	8 Elektrod
Ölçüm Frekansı	20 KHz, 100 KHz
Ölçüm Bölgesi	Sağ EI, Sol EI, Sağ Bacak, Sol Bacak

Fonksiyon Parametreleri

İşletim Sistemi	Android
Veri Depolama	120.000 Rapor
Ekran	10.1" Renkli Multit-Touch Dokunmatik Ekran
Giriş Methodu	İkinci Nesil ID Kart, Kod Okuyucu
Yazdırma Methodu	Termal Yazıcı, Harici A4 Yazıcı Desteği
Açılış Süresi	< 30 sn
Ses Fonksiyonu	Sesli Yönlendirme
Ağırlık Ölçümü	1 - 200 kg
Yaş Ölçümü	3 - 99 Yaş
Ölçüm Methodu	Bağımsız Ölçüm

Ek Özellikler

Güç Kaynağı	100-240 V; 50/60 Hz
Ürün Ağırlığı	48 kg
Ürün Boyutu	62.5 x 40.5 x 234.5 cm
Harici Arayüz	RJ45, USB
Çalışma Ortamı	5 - 40 °C, 15-93% (Nem)
Depolama Ortamı	-25 - 70°C, <93% (Nem)

ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com
info@andamedikal.com




SeaMed®



VÜCUT ANALİZ CİHAZI

SK-X9

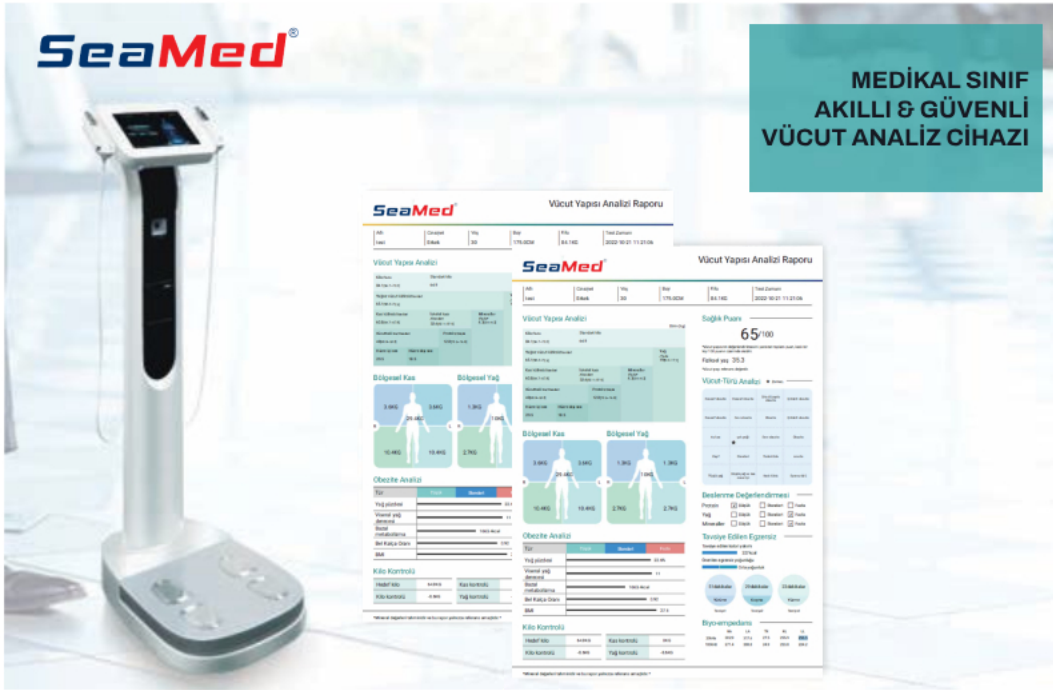

**MEDİKAL SINIF
AKILLI & GÜVENLİ
VÜCUT ANALİZ CİHAZI**



Yükseklik



Ağırlık



Yağsız Ağırlık



Vücut Nemi



Kemik Kütlesi



Vücut Yağ Kütlesi



BMI



Vücut Yağ Oranı



Kalça-Bel Oranı



Visseral Yağ Sınıfı



Bazal Metabolik



Segmental Kas Kütlesi



Segmental Yağ Kütlesi




Kas Yağ Kontrolü



Vücut Yaşı



Sağlık Skoru

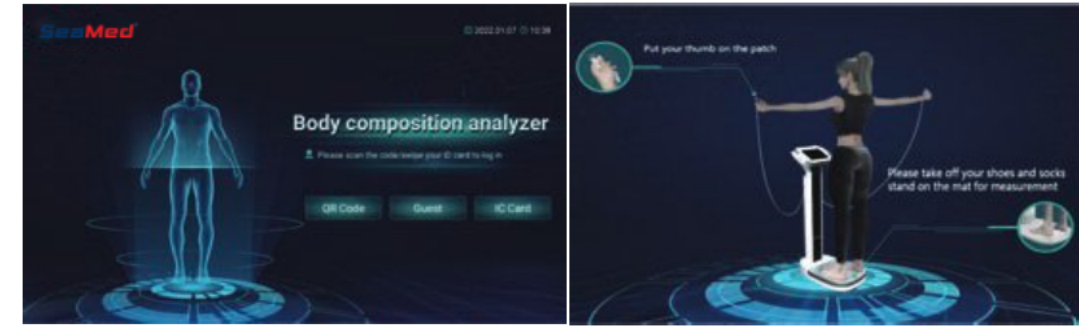

Senkronize Entegre Ölçüm ile Hassas ve Güvenilir

Ağırlık ve vücut kompozisyonu senkronize olarak ölçülür, Otomatik toplanan uzunluk verisi manuel veri girişi gerektirmez



Akıllı Koruma ile Güvenli

Medikal sınıf EMC (YY0505-2012) sertifikası, güvenli Optoküler elektrik izolasyonu



BIA Vücut Kompozisyon Ölçüm Methodu

Çoklu-Yumru, Çoklu-Frekans beşeri empedans ölçüm methodu, %1 hata payı



Akıllı Bağlantı ile Erişilebilir

Çeşitli giriş methodlarını destekler; ID Kart, QR Kod, Otomatik Veri Aktarımı Ethernet Desteği / WiFi / Bluetooth