



OTOSKOP & OFTALMOSKOP



## LED Fiber Optik Otoskop


Otoskop, dış ve orta kulak patolojilerini teşhis etmek amacıyla kulak zarı ve dış kulak kanalını görüntülemek için kullanılır. KBB'de en çok kullanılan cihazdır.

- ◆ Fiber optikler ışık sistemini iletir; fiber optikler daha fazla ışık çıkışı ve daha az parlama için cihazın ucuna kadar uzanır.
- ◆ 2,5x büyütme
- ◆ Yeniden Kullanılabilir Kulak Spekülası: Her biri için 2,5 mm ve 4,0 mm, 5. İsteğe bağlı olarak 3mm ve 5mm.
- ◆ İnsüflasyon Portu: İnsüflatör ampulü kullanarak timpanik membranı görüntüleyin.
- ◆ Otoskop, 2 adet AA alkalin veya Li-ion Şarj Edilebilir pil (opsiyonel) ile mevcuttur.
- ◆ Yalnızca LED ampulle kullanın, ampulün modeli L4952, 2,5V, 1,6W'dir.
- ◆ Akıllı tasarım, mobil teşhis için uygundur.



460E0150

## Kulak Spekülumları

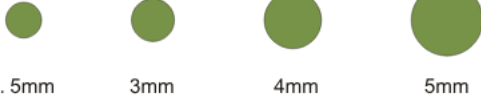

2. 5mm

3mm

4mm

5mm

İnsüflatör-puar  
461-0050

## LED Fiber Optik KBB Teşhis Seti

	2.5V Oscope	K Handles	Desk Charger	Zipper Case
	LED	AA	Li-Ion	
Order Code	460E0150	460-0520460-0570	407-1000	M0
<b>460E781</b>	■	■		■
<b>460E881</b>	■		■	■



461-0050

# FİBER OPTİK AYDINLATMALI OTOSKOP


GENEL TIP VE KBB ALETLERİ

## Fiber Optik Otoskop & Oftalmoskop Seti



## Reusable Spekulum

- ◆ Yeniden kullanılabilir uçlar, 134°C'ye kadar otoklavlanabilir, 10 dakika.
- ◆ Pürüzsüz iç yüzeyli, yüksek yoğunluklu Polipropilenden yapılmıştır.
- ◆ Pozitif kilitleme tasarımı. Otoskop kafasına sıkı uyum.
- ◆ Yalnızca OT8C Fiber Otoskop ile uyumludur.

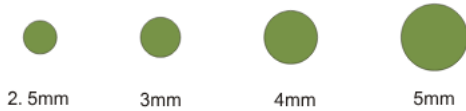

2.5mm

3mm

4mm

5mm



**460-0070** Reusable Ear-Specula, 2.5mm and 4.0mm, 5 for each

**460-0074** Reusable Ear-Specula. Pack of 200 pcs, 2.5mm dia. 200 pcs./pack

**460-0075** Reusable Ear-Specula. Pack of 200 pcs, 3.0mm dia. 200 pcs./pack

**460-0076** Reusable Ear-Specula. Pack of 200 pcs, 4.0mm dia. 200 pcs./pack

**460-0077** Reusable Ear-Specula. Pack of 200 pcs, 5.0mm dia. 200 pcs./pack

# FİBER OPTİK AYDINLATMALI OTOSKOP

GENEL TIP VE KBB ALETLERİ

LED

## 3.5V Operasyonel Otokop



462E0010

- ◆
- ◆
- ◆ Hareketli spekulum tutucusu herhangi bir pozisyonda sabitlenebilir.
- ◆ Lamba:T3100 or T3100-LED
- ◆ 1.5 X Büyütme



## Operasyonel Otokop için Yeniden Kullanılabilir Kulak Spekulumu

- ◆ Yeniden kullanılabilir uçlar, 134°C'ye kadar otoklavlanabilir, 10 dakika.
- ◆ Pürüzsüz iç yüzeyli, yüksek yoğunluklu Polipropilenden yapılmıştır.
- ◆ Pozitif kilitleme tasarımı. Otokop kafasına sıkı uyum.
- ◆ Yalnızca OT8C Fiber Otokop ile uyumludur.



Ear-specula

## LED Direkt Oftalmoskop

LED

Direkt oftalmoskop, gözün iç yapılarını, özellikle de retinayı incelemek için kullanılır.

- ◆ Oftalmoskop, AA alkalın veya 2,5V şarj edilebilir Li-ion pil (isteğe bağlı) ile mevcuttur.
- ◆ Akıllı tasarım ve konforlu çalışma.
- ◆ Küçük gözbebeği için uygundur.
- ◆ 0D'den  $\pm 20D$ 'ye kadar 19 lens: 0D,  $\pm 1D$ ,  $\pm 2D$ ,  $\pm 3D$ ,  $\pm 4D$ ,  $\pm 6D$ ,  $\pm 8D$ ,  $\pm 10D$ ,  $\pm 15D$ ,  $\pm 20D$ .



Red-free filter, hemispot, small spot, large spot, Fixation aperture



405E0150



# KOMBİNE TEŞHİS SETLERİ

## DUVARA MONTE TEŞHİS SETİ

Güçü otomatik olarak açar



Yalnızca bir tutamakla mevcuttur ve maksimum 2 tutamağa kadar genişletilebilir.

Spekulum Dispanseri

Spiral kordon 3 metreye kadar uzatılabilir.

485-1050

### 485-1050

DW1050 Set şunları içerir: 3,5V Koaksiyel Oftalmoskop, 3,5V Fiber Otoskop, 485 Duvara Montajlı Transformatör, saplı, Spekulum dağıtıcı, Kulak-aynacı (2,7 mm ve 4,2 mm, her biri 35 adet), Tansiyon Aleti, Kulak Termometresi, Fişli güç kablosu, Ahşap plaka (büyük boy), Karton Kutu.

### ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com  
info@andamedikal.com

